

病院長


石州会 薬局

(第5号)

医薬品タイムリー情報

大塚生食注2ポート バイアル接続時のポイント

容器の首部を持って傾け
バイアルのゴム栓中央部に注入針を差し込みます

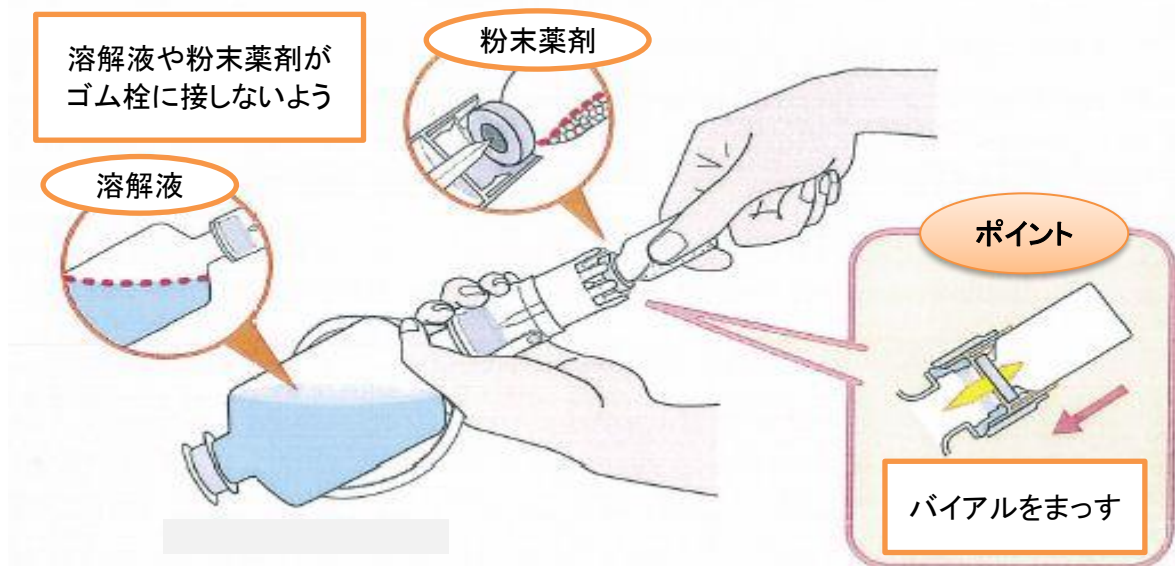

注入針の曲がりの原因	液もれの原因	粉末薬剤もれの原因
<p>ゴム栓の周辺部に刺すと…</p> <p>針が曲がることもある</p>	<p>注入針が完全に刺し込まれていないと…</p> <p>液漏れ</p> <p>接続断面図</p> <p>溶解操作のときに 注入針内を通じて液もれすることが</p>	<p>注入針の胴部を固定したまま刺したり容器を正立にして押し込んでしまうと…</p> <p>注入針の胴部が指で固定された場合など</p> <p>接続断面図</p> <p>薬剤が注入針内を通じて容器のゴム栓面にこぼれることがある</p>